



RESTAURA LA
TRANQUILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
EN TU HOGAR

www.bruno.com



COMBINA CALIDAD, COMODIDAD Y ESTILO

Cuando buscas la mejor calidad de un salvaescalera combinado con un gran estilo, estás buscando la Elite de Bruno. La Elite brinda accesibilidad libre de preocupaciones a todos los niveles de tu hogar y el estilo de la Elite combina con el ambiente de tu hogar.

Deja que la Elite de Bruno te conecte con todos los niveles de tu casa nuevamente.

- Operación fácil y confiable
- Transporte suave y silencioso
- Estilo y comodidad de lujo

Capacidad de elevación de
400 lb (190 kg)

www.bruno.com

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Tenga tranquilidad con la garantía más completa en la industria de las escaleras elevadoras.

Garantía de por vida en los componentes principales: motor, caja de cambios, tren de transmisión y ferrocarril: durante toda la vida útil de Bruno Stairlift, siempre que el comprador es propietario de la escalera elevadora.

Garantía de 2 años en todos los componentes después: de la fecha de instalación por un distribuidor autorizado de Bruno.

Cobertura laboral de 30 días: después de la fecha de instalación por un distribuidor autorizado de Bruno para cualquier defecto de fabricación.

¡Solicite detalles completos a su distribuidor Bruno!






CARACTERÍSTICAS DE LA ELITE

- Asiento acolchado de gran tamaño con múltiples ajustes
- Descanso de brazos se ajustable a lo ancho
- Riel anodizado con engranes cubiertos para una presentación elegante
- Soporte de pies ajustables para máxima comodidad
- Diseño vertical del riel permite instalación dentro de 6 in (152 mm) de la pared
- Tablero con ayuda visual/auditiva para diagnosticar fácilmente
- Banda de carga continua permite recargar la unidad donde quiera que se detenga
- Dos controles que permiten controlar la unidad remotamente
- Dos baterías de 12V aseguran que brinde servicio aun cuando se vaya la electricidad
- Inicio y llegada suave permite un traslado cómodo de inicio a fin
- Asientos y descanso de brazos que se doblan para mejor aprovechamiento del espacio




Pregunta a tu distribuidor acerca de opciones de colores y tapicería.

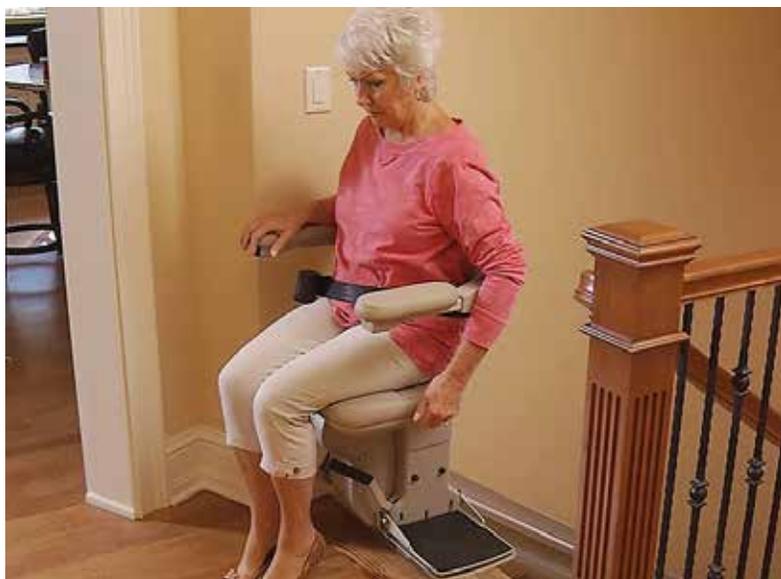

Asiento giratorio con desnivel para subir/bajar sin esfuerzo.

“El salvaescaleras de Bruno ha eliminado una enorme cantidad de ansiedad y estrés. Nos sentimos agradecidos cada día.”

A. Wambold - VA

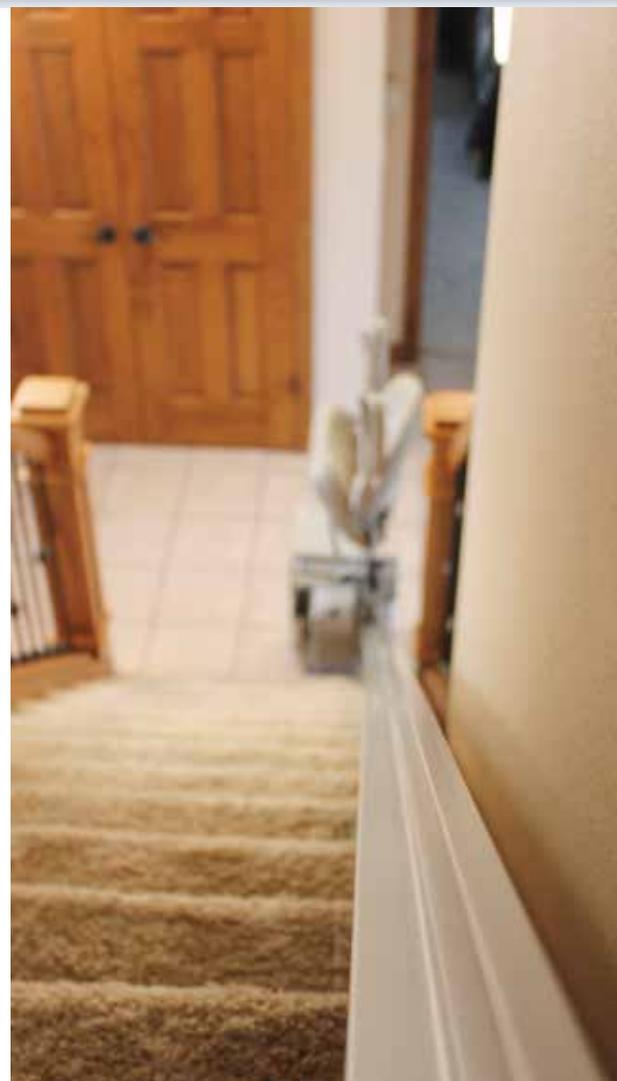


Instalación cercana a la pared.

OPCIONES DE ELITE



El apoyo para pies se dobla / deforma automáticamente hacia arriba/abajo automáticamente cuando se levanta / baja el asiento.

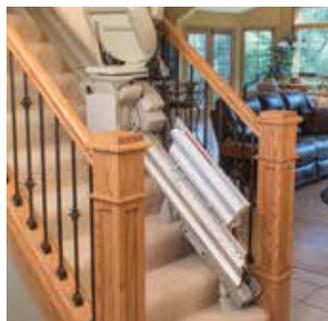

Rieles desplegables para pasillos angostos o cuando una puerta esta en la parte baja de las escaleras. Operación manual o automática.



Asiento giratorio eléctrico para una salida sin esfuerzo. Controlado desde el brazo de la silla o por medio del control inalámbrico.



Asiento y descanso de pies mas grande para mayor comodidad.



“El salvaescaleras es excelente, es muy fuerte y se ve bastante bien también.”

L. UHRING - MI



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño estándar del asiento: 17.5 in ancho x 15 in profundidad (445 mm ancho x 381 mm profundidad)

Tamaño grande del asiento: 21.5 in ancho x 16 in profundidad (546 mm ancho x 406 mm profundidad)

Tamaño estándar del descanso de pies: 10 in ancho x 9 in profundidad (254 mm largo x 229 mm ancho)

Opción grande del descanso de pies: 12 in largo x 11 in ancho (305 mm largo x 279 mm ancho)

Acerca de Bruno

Bruno ha ayudado a mejorar la vida de personas con movilidad limitada por mas de 30 años. Con ingeniería y manufacturado en USA, las salvaescaleras y plataformas verticales de Bruno ayudan a mucha gente a ingresar mas fácilmente a hogares, edificios públicos y negocios, y la línea completa de elevadores para sillas de ruedas/scooters ayuda a transportar sus accesorios de movilidad con mayor facilidad. Como una empresa familiar, Bruno se siente orgullosa en mostrar su enfoque, calidad y seguridad y su posicionamiento como líderes en la industria.

Orgullosamente hecho en USA.



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066

www.bruno.com



CONSUMERAFFAIRS

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2019
2019-04-08-Elite-Spanish.indd • MKT-SL-2